

Efeito fotoeléctrico

Determinação da constante de Planck.

1 OBJECTIVO DO TRABALHO

- Verificação experimental do efeito fotoeléctrico
- Determinação da energia cinética dos fotoelectrões em função da frequência da luz incidente sobre a celula fotoeléctrica
- Determinação da constante de Planck, h

2 INTRODUÇÃO

O efeito fotoelétrico era já conhecido no final do séc. XIX, com a emissão de partículas carregadas da superfície de um metal quando ilumidas por luz intensa. No entanto verificou-se que a energia destas partículas, que mais tarde foram indentificadas por eletrões, não dependia da intensidade mas sim do comprimento de onda da luz incidente. A intensidade só determina o número de fotoeletrões emitidos. A explicação correcta do efeito fotoeléctrico foi proposta em 1905 por Einstein¹ baseada na teoria de Max Planck² da emissão-absorção da luz.

$$E = h\nu = K_e^{max} + W_O \tag{1}$$

Em que K_e^{max} é a energia cinética máxima dos fotoeletrões e W_O é a energia necessária para remover os eletrões da superfície do material (*Work function*, característica de cada metal). E é então a energia do quantum de luz que se batizou como fotão.

De acordo com esta teoria corpuscular da luz, quando um fotão incide sobre a superficie de um sólido é absorvido por um átomo, dá-se a libertação de um dos electrões de valência. A estes electrões tem de ser comunicada uma enegia para que se libertem da rede metálica. Se o fotão incidente tiver mais energia que um limiar (W_O) , o fotoelectrão sai do sólido com uma energia cinetica $K_e = h\nu - W_O$. A figura 1 representa esquematicamente o fotão incidente, a superfície do sólido, os níveis de energia dos electrões de valência do material. Note que se a energia do fotão incidente não for suficiente (se $E_f < W_O$) não há emissão de fotoelectrões.

¹Pela qual recebeu o prémio Nobel em 1921.

²Teoria Quântica da luz, pela qual recebeu o prémio Nobel em 1918.

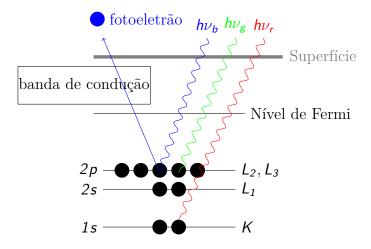


Figura 1 – Efeito fotoeléctrico

A constante de Planck pode ser determinada expondo a superficie de um metal a luz monocromática, caracterizada por um comprimento de onda $\lambda = c/\nu$, e medindo a energia cinética máxima dos fotoelectrões emitidos. A fig. 2 representa esquematicamente uma montagem experimental para a realização desta experiência.

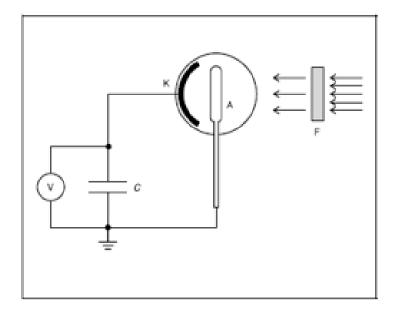


Figura 2 – Diagrama esquematico da experiência do efeito fotoelétrico

A luz incide na superfície de metal, designado $c\acute{a}todo$ (K), através de um $\^{a}nodo$ anelar ou transparente. Como cátodo é normalmente utilizado um metal alcalino (K, Na, Cd) pois neste caso os electrões de valência estão fracamente ligados ao nucleo (i.e. têm uma função trabalho W baixa). Como $\^{a}$ nodo utiliza-se por exemplo a platina (Pt). O $\^{a}$ nodo recebe parte dos fotoelectrões emitidos dando origem a uma corrente I_f . Se aplicarmos um potencial eléctrico retardador V entre o $\^{a}$ nodo e o cátodo a fotocorrente decresce, pois os fotoeletrões ter $\~{a}$ 0 de vencer uma barreira de potencial eletrostática U=Ve, onde e6 a carga do electr $\~{a}$ 0. Para uma dada tens $\~{a}$ 0 crítica V_s (potencial de paragem), deixa

de existir fotocorrente. Neste caso, mesmo os electrões mais fracamente ligados e que assim têm as maiores energias cinéticas, são parados. Experimentalmente pode-se usar uma fonte de tensão externa para aplicar o potencial de paragem ou mais simplesmente usa-se um condensador que carrega com a própria corrente dos fotoelectrões (Fig. 2) até esta ser eliminada. Neste caso é necessário utilizar um voltímetro de muito elevada impedância de entrada, ou um amplificador eletrónico de instrumentação, que é o caso da nossa experiência.

Após medir o potencial de paragem, podemos assim escrever³:

$$e V_s = K_e^{max} = h\nu - W_O \tag{2}$$

Medindo o potencial de paragem para varias frequências da luz incidente, podemos então fazer o gráfico de V_s vs ν . Este gráfico é uma recta de declive h/e, e ordenada na origem -W/e.

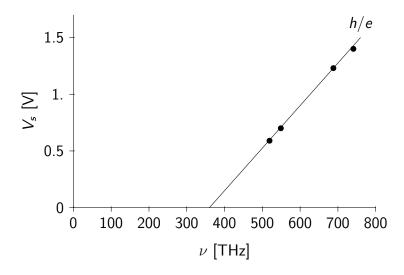


Figura 3 – Exemplo da determinação de h pelo Efeito fotoeléctrico

A constante h é uma das constantes fisicas fundamentais que se conhece com maior precisão relativa ($u_r = 3.4 \times 10^{-8}$). O valor actualmente reconhecido é de $h = 6.62606889(23) \times 10^{-34} \ J \cdot s = 4.135667516(91) \times 10^{-15} \ eV \cdot s$. (Os dígitos em parentises representam a incerteza, tendo a mesma resolução dos dois últimos dígitos do valor). A contínua procura de um valor mais preciso não é apenas um puro desafio intelectual da comunidade científica. Terá um efeito prático revolucionário na Metrologia: Como h se pode relacionar com N_A , quando se conhecer com maior precisão⁴ será possível definir a unidade padrão de massa do sistema S.I. a partir da massa de um determinado átomo elemento químico, e portanto válido para todo o Universo. O padrão de massa oficial é o último resistente do sistema MKS que é baseado num "artefacto"; um cilindro de platina-irídio guardado a sete chaves em Sèvres nos subúrbios de Paris⁵.

³Na realidade a função de trabalho tem de ser corrigida pelo potencial de contacto entre os dois metais, $W = W_O - \phi$, o que naturalmente não é importante para a determinação da constante de proporcionalidade.

 $^{^4{\}rm O}$ dispositivo mais preciso é a balança de Watt, onde se espera chegar à precisão de $u_r \sim 1 \times 10^{-11}$

⁵Ver por exemplo o artigo da revista Economist http://www.economist.com/node/18007494

3 Procedimento Experimental

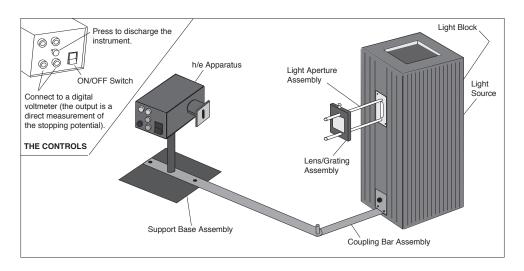


Figura 4 – Montagem Experimental do efeito fotoelétrico

- 1. Ligue a fonte de lâmpada de Mercúrio (Hg) e deixe estabilizar durante cerca de 10 min.
- 2. Enquanto espera, teste as tensõas das duas baterias do amplificador da célula fotovoltaica.
- 3. Monte os componentes tal como indicado na Fig. 4
- 4. Regule o conjunto de lente + rede de Difração de modo a obter as riscas de côr bem focadas na zona do detector. Alinhe a montagem para que a célula seja bem iluminada pelo feixe depois de passar pela fenda.
- 5. Observe as várias riscas, anote e interprete os ângulos de Difração e Ordem. A figura é simétrica no que toca às posições e intensidades observadas?
- 6. Para cada uma das riscas, depois de pressionar o botão de RESET, anote o valor da tensão de paragem e o tempo aproximado até esta estabilizar.
- 7. Repita o ponto anterior para outras duas riscas (côres) e com pelo menos dois filtros de transmissão.

Côr	Freq [THz]	$\lambda \text{ [nm]}$
Amarelo	518.672	578
Verde	548.996	546.074
Azul	687.858	435.835
Violeta	740.858	404.656
U.V.	820.264	365.483

Tabela 1 – Riscas observáveis do espectro de Mercúrio

Pode consultar o espectro de Mercúrio em NIST Atomic Spectra Database, esconhendo o elemento "Hg I" e um *Relative intensity minimum*: de 1000, por exemplo.